

## 毎日の歯みがき習慣&仕上げ みがきまでが揃った親子 トレーニングセットです。

赤ちゃんの手や口、唇の発達に合わせて  
ステップアップできる歯ブラシセットです。  
むし歯予防に重要な“唾液”は、寝ている間は  
分泌量が減少するので、寝る前に仕上げみが  
きの習慣をつけさせましょう。汚れが溜まり  
やすい上の奥歯の外側、下の奥歯の舌側を  
しっかりみがいてあげましょう。

松本歯科大学 齋島弘之 教授  
あすなろ小児歯科医院 院長・歯学博士 佐野正之 先生

前歯が  
揃うころ



奥歯が生  
えるころ




奥歯が生  
えるころ



やわらかベビーハブラシ、  
奥歯ピカピカベビーハブラシ  
に取り付けられます。

のど突き防止プレート

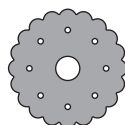

### ⚠️ 注意 (ちゅうい) 保護者の方へ必ずお読みください。

お子様の健やかな成長には歯みがきの習慣づけは大切です。

安全に行って頂くため、下記に注意して見守ってください。

- 本品をくわえたまま遊んだり、歩いたり、走ったりさせないでください。転倒してのどなどを突くと重大な事故となります。
- 歯みがきは踏み台やソファなど不安定な場所は避け、床などに座らせて行ってください。その際も、必ず保護者の方は目を離さないでください。お子様が歯ブラシをくわえたまま、立ち上がって転倒すると重大な事故となります。
- 本品を用途以外の目的で使用しないでください。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 安全のため、破損や変形したものは使用しないでください。
- お子様が寝入った場合、必ず本品をお子様からはなしてください。
- ブラシヘッド部を強くかんで引っ張らないようにしてください。ちぎれたり、折れたりなど破損や変形のおそれがあります。
- 仕上げみがきは保護者の方が専用歯ブラシで行ってください。
- 本品を使用中に異常を感じた場合、すぐに使用を中止して歯科医に相談してください。
- はじめて使用するときには、必ず洗浄や消毒をしてください。


### 【洗浄・消毒時の注意】

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は下記対応表を参照してください。
- 煮沸消毒は、たっぷりのお湯で3~5分煮沸してください。
- 電子レンジによる蒸気消毒、薬液消毒は各消毒用品の取扱い方法にしたがってください。
- 使用後は歯ブラシを流水で十分にすすぎ、よく水を切ってから風通しのよい場所で保管してください。

対応表

製品名	部材名	材質	耐熱温度	消毒方法				食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ		
やわらかベビーハブラシ	本体	柄	ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○
		柄ラバー部・毛	熱可塑性エラストマー	120℃	○	○	○	○
奥歯ピカピカベビーハブラシ・ こんばん歯ママハブラシ(奥歯用)	本体	柄	ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○
		柄ラバー部・毛(先端部) 毛(毛のかたさ:やわらかめ)	熱可塑性エラストマー ナイロン	120℃ 80℃	×	×	×	×
のど突き防止プレート	本体	ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○	

○:できる ×:できない

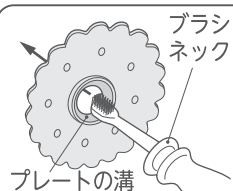

### のど突き防止プレートの取付方法

プレート裏面からブラシヘッド部を挿入します。  
プレートを斜めに傾け、ブラシネック部分を片側  
ずつプレートに押し込みます。ブラシネック部分  
がプレートの溝にしっかりとハマっていることを  
確認してから使用してください。

- 食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- 機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社 リッチェル


富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間: 9:00~17:00

(土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA 1912



トライ たべたら歯みがきセット 奥歯用

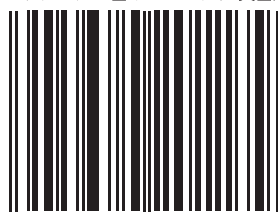

4 945680 201179